


# WOUNDSEAL®

## How to Apply WoundSeal Powder + Applicator:

Clean wound and apply only when bleeding resumes. WoundSeal Powder needs blood to work. For hard-to-reach wounds use enclosed applicator to apply powder.

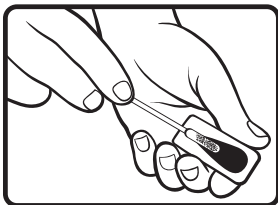

### 1. Peel blister and load applicator.



### 2. Cover Wound completely with powder.

### 3. Press for 30 seconds using applicator or fingers, to form the protective scab and stop the bleeding.

**Repeat application if needed.**

The protective scab is safe to leave in place until it falls off naturally. Avoid wetting the scab for one hour. Occasionally upon application, a temporary warming or stinging sensation may be felt. If WoundSeal Powder must be removed as determined by a healthcare professional, brush away loose powder then soak wound in sterile water until scab starts loosening from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

#### **Warnings:**

**For external use only.** Not intended to replace stitches. Do not apply Powder to visibly infected wounds. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Keep out of reach of children.

#### **Cautions:**

Store in a clean, dry place. Use by expiration date listed. Discard if product is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use since Powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity.

One WoundSeal pack is sufficient to cover a wound area of up to 4.6 sq. cm (.7 sq. in.) to a depth of 2mm.

#### **Ingredients:**

Hydrophilic polymer and potassium ferrate.

Manufactured by Biolife LLC 8163 25th Ct. East. Sarasota, FL 34243.

WoundSeal is a registered trademark of Biolife, LLC.

Patents 6,521,265 and 6,187,347. Other US and International Patents Pending.

Made in the USA. All Rights Reserved. © 2014 Biolife, LLC.

For additional product information, call

1-800-722-7559,

or e-mail us at [customer.care@biolife.com](mailto:customer.care@biolife.com)

**[www.woundseal.com](http://www.woundseal.com)**

# WOUNDSEAL®

**Instrucciones de uso:** (para heridas externas) Limpie la herida y aplique solamente cuando vuelva a sangrar. WoundSeal en Polvo necesita sangre para poder funcionar.



1. Despegue la parte posterior del empaque y **RUEDA EL APLICADOR SOBRE EL POLVO**



2. **CUBRIR LA HERIDA** con tanto polvo como sea posible.
3. **PRESIONE DURANTE 30 SEGUNDOS** utilizando aplicador o los dedos, para formar la costra protectora y detener el sangrado.

**Repita la aplicación si es necesario.**

La costra protectora que se forma debe dejarse en el sitio hasta que se caiga por sí sola. Evite mojar la costra por espacio de una hora después de aplicado el producto. Ocasionalmente, se puede percibir una sensación temporal de calor o de ardor. Si el profesional de la salud determina que el WoundSeal en Polvo debe ser removido, quite el exceso de polvo, luego remoje la herida en agua estéril hasta que la costra empiece a despegarse. Quite con cuidado la costra despegada con un dedo enguantado o un bajalengua.

**Advertencia: SÓLO PARA USO EXTERNO.** No es un sustituto de suturas. Busque ayuda médica si la herida requiere de suturas. No aplique WoundSeal en Polvo en heridas que estén visiblemente infectadas. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede ser dañino si se inhala o consume. Evite inhalar el polvo a través de la fosa nasal o de la cavidad bucal. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuague los ojos con agua abundante. Busque atención medica si persiste la irritación, o si el sangrado continua, ya que esto puede indicar un problema más serio.

**PRECAUCIÓN:** Guarde en un lugar limpio y seco. Use antes de la fecha de expiración que se indica en el empaque. Deseche el contenido si el dispensador está dañado, ha sido abierto, o si el polvo se ha endurecido y no está suelto. Deseche el remanente después de su aplicación, ya que se garantiza la efectividad de WoundSeal en Polvo sólo si el polvo no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

Un paquete de WoundSeal es suficiente para cubrir una área de la herida de hasta 4.6 sq. cm (.7 sq. in.) a una profundidad de 2mm

**Ingredientes:** Polímero hidrofílico y ferrato de potasio.

Fabricado por Biolife, LLC, 8163 25th Court E, FL 34243.

WoundSeal es una marca de comercio registradas de Biolife, LLC. Patente americana 6.521.265 y 6.187.347.

Fabricado en Estados Unidos. Todos los derechos registrados. © 2014 Biolife, LLC.

Para información adicional de los productos, llamar

1-800-722-7559 dirección de correo

customer.care@biolife.com

o visite nuestro sitio de Internet

**www.woundseal.com**