


WOUNDSEAL®


How to Apply WoundSeal Powder (for external wounds)

Clean wound and apply only when bleeding resumes.


WoundSeal Powder needs blood to work.

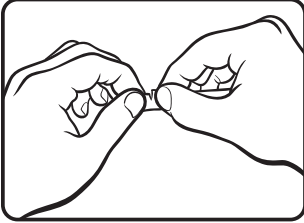

1. **TEAR** package open at perforation.

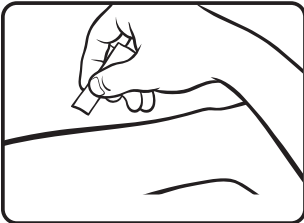

2. **POUR** onto bleeding wound, completely covering it.

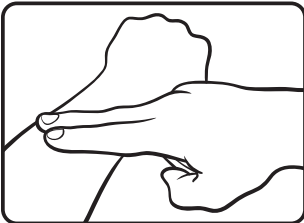

3. **PRESS** for 30 seconds to form the protective scab and stop the bleeding.

Repeat application if needed. The protective scab is safe to leave in place until it falls off naturally. Avoid wetting the scab for one hour. Occasionally upon application, a temporary warming or stinging sensation may be felt.

If WoundSeal Powder must be removed as determined by a healthcare professional, brush away loose powder then soak wound in sterile water until scab starts loosening from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

Warnings: FOR EXTERNAL USE ONLY. Not intended to replace stitches. Seek medical attention if wound requires stitches. Do not apply WoundSeal Powder to visibly infected wounds. Keep out of reach of children. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Seek medical attention if any irritation persists or if bleeding continues as this could indicate a more serious problem.

CAUTION: Store in a clean, dry place. Use by the expiration date listed. Discard if dispenser is damaged, opened, or if powder has caked and does not flow freely. Discard contents after use, as WoundSeal Powder is guaranteed effective only if it has not been left exposed to air or humidity.

Ingredients: Hydrophilic polymer and potassium ferrate.

Manufactured by Biolife LLC 1235 Tallevast Rd. Sarasota, FL 34243.

WoundSeal is a registered trademark of Biolife, LLC.

Patent 6,187,347. Other US and International Patents Pending.

Made in the USA. All Rights Reserved. © 2010 Biolife, LLC.

For additional product information, call

1-800-722-7559,


or e-mail us at customer.care@biolife.com

www.woundseal.com


WOUNDSEAL®

Instrucciones de uso: (para heridas externas)


Limpie la herida y aplique solamente cuando vuelva a sangrar. WoundSeal en Polvo necesita sangre para poder funcionar.

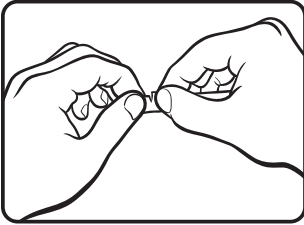

1. RASGUE el paquete por la parte perforada.

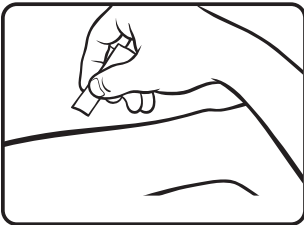

2. VIERTA el polvo sobre la herida sangrante hasta cubrirla completamente.

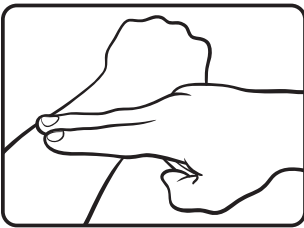

3. PRESIONE por espacio de 30 segundos para que se forme la costra protectora y cese el sangrado.

Repita la aplicación si es necesario. La costra protectora que se forma debe dejarse en el sitio hasta que se caiga por sí sola. Evite mojar la costra por espacio de una hora después de aplicado el producto. Ocasionalmente, se puede percibir una sensación temporal de calor o de ardor.

Si el profesional de la salud determina que el WoundSeal en Polvo debe ser removido, quite el exceso de polvo, luego remoje la herida en agua estéril hasta que la costra empiece a despegarse. Quite con cuidado la costra despegada con un dedo enguantado o un bajalengua.

Advertencias: SÓLO PARA USO EXTERNO. No es un sustituto de suturas. Busque ayuda médica si la herida requiere de suturas. No aplique WoundSeal en Polvo en heridas que estén visiblemente infectadas. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede ser dañino si se inhala o consume. Evite inhalar el polvo a través de la fosa nasal o de la cavidad bucal. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuague los ojos con agua abundante. Busque atención médica si persiste la irritación, o si el sangrado continúa, ya que esto puede indicar un problema más serio.

PRECAUCIÓN: Guarde en un lugar limpio y seco. Use antes de la fecha de expiración que se indica en el empaque. Deseche el contenido si el dispensador está dañado, ha sido abierto, o si el polvo se ha endurecido y no está suelto. Deseche el remanente después de su aplicación, ya que se garantiza la efectividad de WoundSeal en Polvo sólo si el polvo no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

Ingredientes: Polímero hidrofílico y ferrato de potasio.

Fabricado por Biolife, LLC, 1235 Tallevast Rd. Sarasota, FL 34243.
WoundSeal es una marca de comercio registradas de Biolife, LLC. Patente americana 6,187,347. Fabricado en Estados Unidos. Todos los derechos registrados.

© 2010 Biolife, LLC. Para información adicional de los productos, llamar 1-800-722-7559
dirección de correo customer.care@biolife.com
o visite nuestro sitio de Internet
www.woundseal.com